

KOLIBRI


Kolibri 2.x



KOLIBRI COMPONENTEN

- Camera ①.
- Mobile camerastandaard ②.
- Kolibri werkstation ③.
- Kolibri kar ④.

OPMERKING. De onderdelen van de camera zijn zeer gevoelig. Als de camera valt of schokt, kan dit leiden tot een onjuiste kalibratie.

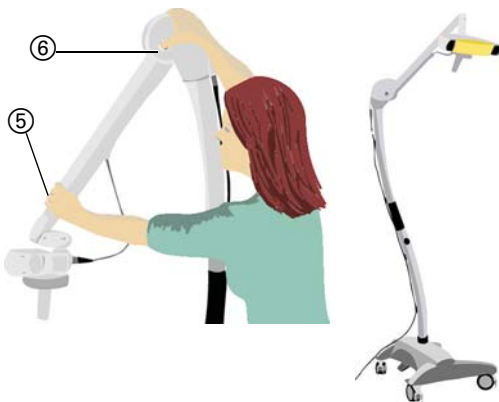

DE CAMERASTANDAARD PLAATSEN

- Pak de camera-arm ⑤ beet.
- Druk op knop ⑥ (als de camera-arm is vergrendeld) en breng de camera-arm in de juiste stand.

OPMERKING. Vouw de camera-arm in als u de camerastandaard parkeert/opslaat.



DE KOLIBRI KAR INSCHAKELEN

- Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de kar en draai de connector ① rechtsom tot deze op zijn plaats klikt.




- Schakel de UPS-schakelaar op de zijkant van de kar in.



HET KOLIBRI WERKSTATION INSCHAKELEN

- Sluit de camerakabel aan op de camerapoort.
- Sluit het netsnoer van de kar aan op de achterzijde van het werkstation.
- Schakel de aan/uitschakelaar aan de achterkant van het werkstation in.
- Druk op de aan/uitknop aan de voorkant van het werkstation.

Opmerking. Deze handleiding is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.

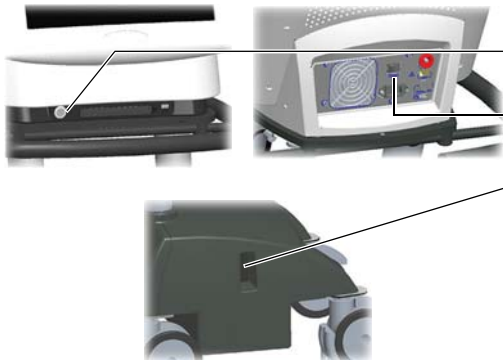


KOLIBRI COMPONENTEN UITSCHAKELEN

- Druk kort op de aan/uitknop aan de voorkant van het werkstation en wacht totdat het systeem is afgesloten.
- Schakel de aan/uitschakelaar aan de achterkant van het werkstation uit.
- Schakel de UPS-schakelaar op de zijkant van de kar uit.



CAMERASTANDAARD AAN KOLIBRI KAR KOPPELEN

- Breng de camera-arm naar 90° ten opzichte van de camerastandaard tot deze op zijn plaats klikt.
- Vouw de camera volledig naar binnen.
- Zet alle vier de wielremmen ① op de camerastandaard los.
- Open het vergrendelmechanisme ② door pedaal ③ op de camerastandaard in te drukken.
- Duw de camerastandaard in de kar. Het vergrendelmechanisme klikt automatisch op zijn plaats.

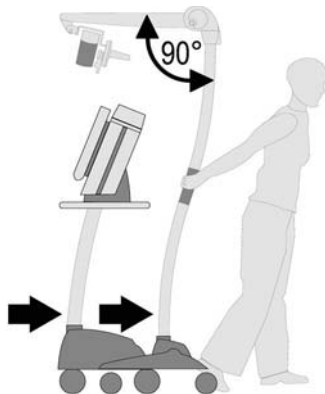

GEKOPPELD SYSTEEM PARKEREN EN VERPLAATSEN

- Breng de camera-arm naar 90° ten opzichte van de camerastandaard tot deze op zijn plaats klikt.
- Verplaatsen: zet alle wielremmen (van de camerastandaard en de kar) los. Pak de camerastandaard bij de handgreep en trek de standaard en de kar naar de gewenste locatie.
- Parkeren: vergrendel alle wielremmen.

OPMERKING. Bescherm alle componenten tegen schokken of stoten om schade aan het systeem te voorkomen.



Temperatuur

In bedrijf
10-32 °C

Tijdens opslag
-10-45 °C



Vochtigheid

In bedrijf
20-80%
zonder
condensatie

Tijdens opslag
10-90%
zonder
condensatie



Vermogen

- Spanning = 100-120 VAC/
200-240 VAC
- Frequentie = 50/60 Hz
- Stroomverbruik = 3 A bij 110/
1,5 A bij 230 VAC

INFORMATIE OVER DE FABRIKANT:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Europe, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
USA & Canada: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Latin America: +55 11 33 55 33 70
France: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze handleiding mag worden vervoelvoudigd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Documentversie: 1.0

Artikelnummer: 60908-63NL

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en verplicht Brainlab tot niets.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk over beperkingen van aansprakelijkheid in de standaard verkoopvoorwaarden van Brainlab.

