

KOLIBRI


Kolibri 2.x



KOLIBRI-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

- Kamera ①.
- Siirrettävä kamerateline ②.
- Kolibri-työasema ③.
- Kolibri-kärky ④.

HUOM! Kameran komponentit ovat hyvin herkkiä. Jos kamera putoaa tai tärähtää, kalibrointi voi vääristyä.

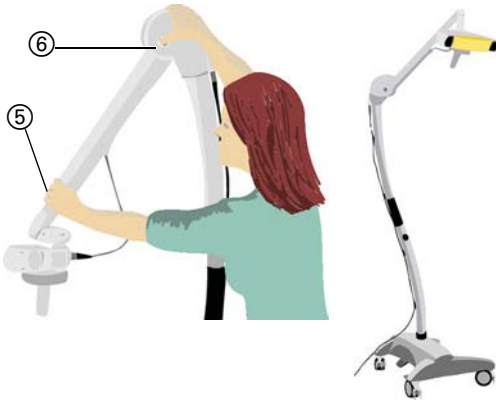

KAMERATELINEEN ASETTELU


- Tartu kameran varteen ⑤.
- Paina vapautuspainiketta ⑥ (jos kameran varsi on lukittu) ja siirrä kameran varsi käyttöasentoon.

HUOM! Kamerateline asetetaan pysäköinti-/säilytysasentoon taittamalla kameran varsi alas.



KOLIBRI-KÄRRYN KYTKEMINEN PÄÄLLE

- Liitä virtajohto kärryn taakse ja käännä liittintä ① myötäpäivään, kunnes se lukittuu napsahtaen.

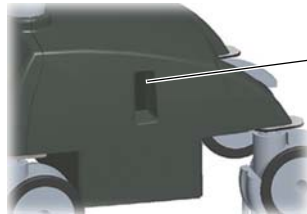


- Kytke kärryn sivussa oleva UPS-laitteen virtakytkin päälle.



KOLIBRI-TYÖASEMAN KYTKEMINEN PÄÄLLE

- Liitä kameran kaapeli kameraporttiin.
- Liitä kärryssä oleva virtakaapeli työaseman takaosaan.
- Kytke työaseman takana oleva virtakytkin päälle.
- Paina työaseman etupuolella olevaa päälle/pois päältä -painiketta.

Huom! Tämä opas ei korvaa käyttöoppaita.

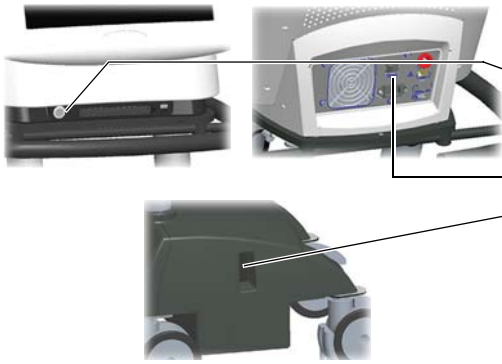


KOLIBRI-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTTIEN SAMMUTTAMINEN

- Paina työaseman etupuolella olevaa päälle-/pois päältä -painiketta lyhyesti ja odota, kunnes järjestelmä on sammunut.
- Kytke työaseman takana oleva virtakytkin pois päältä.
- Kytke karryn sivussa oleva UPS-laitteen virtakytkin pois päältä.



KAMERATELINEEN TELAKOINTI KOLIBRI-KÄRRYYN

- Käännä kamerasivun vartta kameratelineeseen nähden siten, että se asettuu 90° kulmaan ja napsahtaa paikoilleen.
- Taita kamera kokoon kääntämällä se täysin sisäänpäin.
- Vapauta kameratelineen pyörien kaikki neljä jarrua ①.
- Avaa lukitusmekanismi ② painamalla kameratelineessä olevaa vapautuspoljinta ③ alaspäin.
- Työnnä kamerateline kiinni kärryyn. Lukitusmekanismi napsahtaa automaattisesti lukkoon.

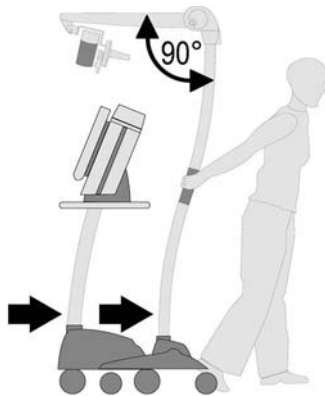

TELAKOIDUN JÄRJESTELMÄN PYSÄKÖINTI JA SIIRTÄMINEN

- Käännä kamerasivun vartta kameratelineeseen nähden siten, että se asettuu 90° kulmaan ja napsahtaa paikoilleen.
- Siirtäminen: Vapauta kaikki pyörien jarrut (kamerateline ja kärry). Pidä kiinni kameratelineen kädensijasta ja vedä kamerateline ja kärry haluaamaasi paikkaan.
- Pysäköinti: lukitse kaikkien pyörien jarrut.

HUOM! Estä järjestelmää vaurioitumasta suojaamalla sen kaikkia komponentteja voimakkailta tärähdyksiltä ja iskuilta.



Lämpötila

Käytössä
10–32 °C

Varastossa
-10–45 °C



Kosteus

Käytössä
20–80 %
tiivistymätön

Varastossa
10–90 %
tiivistymätön



Teho

- Jännite = 100–120 VAC/
200–240 VAC.
- Taajuus = 50/60 Hz.
- Virrankulutus =
3 A/110 VAC; 1,5 A/230 VAC.

VALMISTAJAA KOSKEVAT TIEDOT:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany
Eurooppa, Afrikka, Aasia,
Australiä: +49 89 99 15 68 44
Yhdysvallat ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +81 3 3769 6900
Etelä- ja Keski-Amerikka: +55 11 33 55 33 70
Ranska: +33-800-67-60-30
Sähköposti: support@brainlab.com

TEKIJÄNOIKEUDET:

Tämä ohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia yrityskohtaisia tietoja. Tämän ohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

Asiakirjan versio: 1.0
Tuotenumero: 60908-63FI

VASTUU:

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ohjeen sisältämät tiedot velvoita Brainlabia mihinkään.

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and Conditions of Sale -asiakirjan osassa "Limitations of Liability".