

# KOLIBRI


Kolibri 2.x



## KOLIBRI-KOMPONENTEN

- Kamera ①
- Mobiles Kamerastativ ②
- Kolibri-Workstation ③
- Kolibri-Cart ④

**HINWEIS:** Die Kamerakomponenten sind sehr sensibel. Stürze oder Stöße können daher zu Fehlkalibrierungen führen.

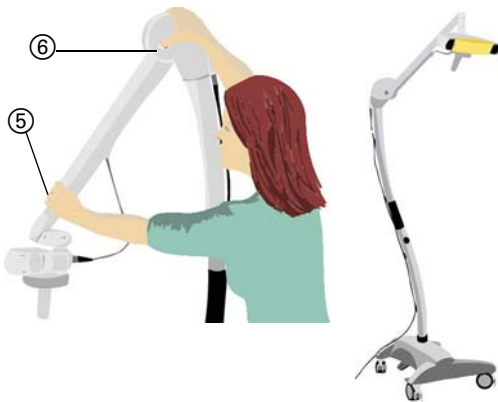

## POSITIONIEREN DES KAMERASTATIVS

- Greifen Sie den Kameraarm ⑤.
- Drücken Sie den Verriegelungsknopf ⑥ (falls der Kameraarm gesperrt ist) und bringen Sie den Kameraarm in die Betriebsposition.

**HINWEIS:** Beugen Sie den Kameraarm nach unten, um das Kamerastativ zu parken bzw. in Endposition zu bringen.




## EINSCHALTEN DES KOLIBRI-CARTS

- Verbinden Sie das Netzkabel mit der Rückseite des Carts und drehen Sie den Stecker ① im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.




- Schalten Sie die USV an der Seite des Kolibri-Carts ein.

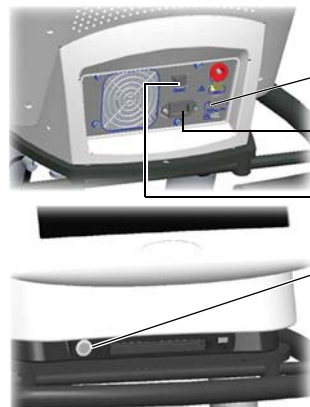

## EINSCHALTEN DER KOLIBRI-WORKSTATION

- Verbinden Sie das Kamerakabel mit dem Kameraanschluss.
- Stecken Sie das Netzkabel des Kolibri-Carts an der Rückseite der Workstation ein.
- Schalten Sie das System am Hauptschalter an der Rückseite des Kolibri-Carts ein.
- Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf vorne an der Workstation.

Hinweis: Diese Anleitung ersetzt nicht die Benutzerhandbücher.

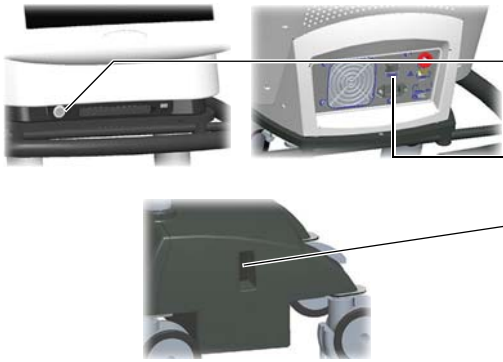

## AUSSCHALTEN DER KOLIBRI-KOMPONENTEN

- Drücken Sie kurz auf den Ein-/Aus-Knopf an der Vorderseite der Workstation und warten Sie, bis das System heruntergefahren ist.
- Schalten Sie das System am Hauptschalter an der Rückseite des Kolibri-Carts aus.
- Schalten Sie die USV an der Seite des Kolibri-Carts aus.



## ANDOCKEN DES KAMERASTATIVS AN DAS KOLIBRI-CART

- Bringen Sie den Kameraarm in einen 90°-Winkel zum Kamerastativ, bis er einrastet.
- Klappen Sie die Kamera komplett nach innen.
- Lösen Sie alle vier Radbremsen ① am Kamerastativ.
- Öffnen Sie den Verriegelungsmechanismus ②, indem Sie das Freigabepedal ③ am Kamerastativ nach unten drücken.
- Schieben Sie das Kamerastativ in das Cart. Der Verriegelungsmechanismus rastet automatisch ein.



## PARKEN UND VERSCHIEBEN DES ANGEDOCKTEN SYSTEMS

- Bringen Sie den Kameraarm in einen 90°-Winkel zum Kamerastativ, bis er einrastet.
- Verschieben: Lösen Sie alle Radbremsen (am Kamerastativ und am Kolibri-Cart). Halten Sie das Kamerastativ an der Grifffläche und ziehen Sie es mit dem Cart in die gewünschte Stellung.
- Parken: Stellen Sie alle Radbremsen fest.

**HINWEIS:** Schützen Sie die Komponenten vor starken Erschütterungen, um eine Beschädigung des Systems zu vermeiden.



### Temperatur

#### Betrieb

10 °C - 32 °C

#### Lagerung

-10 °C - 45 °C



### Feuchtigkeit

#### Betrieb

20 % - 80 %  
nicht  
kondensierend

#### Lagerung

10 % - 90 %  
nicht  
kondensierend



### Stromversorgung

- Netzspannung = 100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC
- Frequenz = 50 / 60 Hz
- Stromverbrauch = 3 A @ 110 / 1,5 A @ 230 VAC

#### HERSTELLER-INFORMATIONEN:

Brainlab AG  
Olof-Palme-Str. 9, 81829 München - Deutschland  
Europa, Afrika, Asien, Australien: +49 89 99 15 68 44  
USA & Kanada: +1 800 597 5911  
Japan: +81 3 3769 6900  
Lateinamerika: +55 11 33 55 33 70  
Frankreich: +33-800-67-60-30  
E-Mail: support@brainlab.com

#### URHEBERRECHT:

Der Inhalt dieses Handbuchs ist urheberrechtlich geschützt.  
Kein Teil dieser Kurzanleitung darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Brainlab übersetzt und vervielfältigt werden.  
Auflage des Dokuments: 1.0  
Artikel-Nummer: 60908-63DE

#### HAFTUNG:

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens Brainlab dar.  
Weitere Informationen zum Thema Haftung finden Sie in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Brainlab unter Haftung.