

KOLIBRI


Kolibri 2.x



A KOLIBRI ALKOTÓELEMEI

- Kamera ①
- Mozgó kameraállvány ②
- Kolibri munkaállomás ③
- Kolibri kocsi ④

MEGJEGYZÉS. A kamera alkotóelemei nagyon érzékenyek. A kamera leejtése vagy rázkódása a kalibrálás elvesztéséhez vezethet.

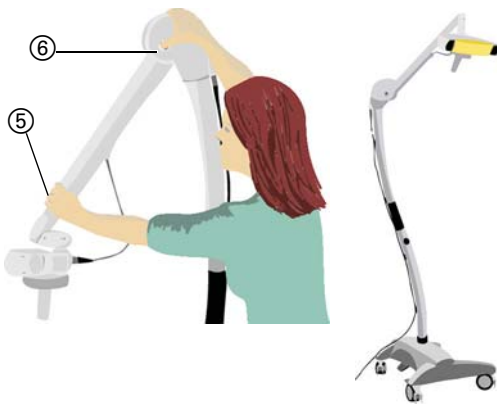

A KAMERAÁLLVÁNY ELHELYEZÉSE

- Fogja meg a kamerakart ⑤.
- Nyomja meg a kioldógombot ⑥ (ha a kamerakar zárva van), és húzza a kamerakart működési pozícióba.

MEGJEGYZÉS. A kameraállvány parkolásához/tárolásához hajtsa le a kamerakart.



A KOLIBRI KOCSI BEKAPCSOLÁSA

- Csatlakoztassa a tápkábelt a kocsi hátuljához, és forgassa a csatlakozót ① az óramutató járásával megegyező irányban, amíg be nem pattan.




- Kapcsolja be az UPS hálózati kapcsolót a kocsi oldalán.



A KOLIBRI MUNKAÁLLOMÁS BEKAPCSOLÁSA

- Csatlakoztassa a kamerakábelt a kameraporthoz.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a munkaállomás hátuljához.
- Kapcsolja be a hálózati kapcsolót a munkaállomás hátulján.
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a munkaállomás elején.

Megjegyzés. Ez az útmutató nem helyettesíti a felhasználói kézikönyveket.

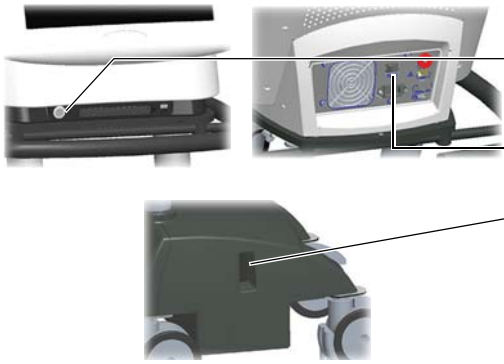


KOLIBRI ALKOTÓELEMEK KIKAPCSOLÁSA

- Röviden nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a munkaállomás elején, és várjon, amíg a kikapcsolás befejeződik.
- Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót a munkaállomás hátulján.
- Kapcsolja ki az UPS hálózati kapcsolót a kocsni oldalán.



A KAMERAÁLLVÁNY KOLIBRI KOCSIHOZ VALÓ CSATOLÁSA

- Húzza a kamerakart 90°-os szögbe a kameraállvánnyal, amíg a helyére nem pattan.
- Teljesen hajtsa be a kamerát.
- Engedje fel mind a négy kerék fékjét ① a kameraállványon.
- Nyissa ki a zárszerkezetet ② a kameraállványon található kiengedőpedál ③ lefelé nyomásával.
- Tolja a kameraállványt a kocsira. A zárszerkezet automatikusan bepattan.

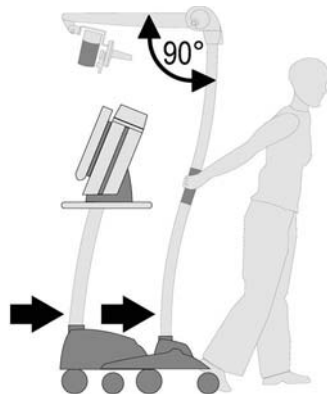

A CSATOLT RENDSZER PARKOLÁSA ÉS MOZGATÁSA

- Húzza a kamerakart 90°-os szögbe a kameraállvánnyal, amíg a helyére nem pattan.
- Mozgatás: Engedje fel az összes kerékféket (kameraállvány és kocsni). Tartsa a kameraállvány markolatát, majd húzza a kameraállványt és a kocsit a kívánt helyre.
- Parkolás: Blokkolja az összes kerékféket.

MEGJEGYZÉS. A rendszer károsodásának megakadályozása érdekében védje valamennyi alkotóelemet az erős ütődésektől és lökésektől.



Hőmérséklet

Működtetés	Tárolás
10 - 32 °C	-10 - 45 °C



Páratartalom

Működtetés	Tárolás
20 - 80% nem kondenzálódó	10 - 90% nem kondenzálódó



Áram

- Feszültség = 100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC
- Frekvencia = 50 / 60 Hz
- Áramfogyasztás = 3 A - 110 / 1,5 A - 230 VAC

GYÁRTÓRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK:

Brainlab AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Germany
Európa, Afrika, Ázsia, Ausztrália: +49 89 99 15 68 44
USA és Kanada: +1 800 597 5911
Japán: +81 3 3769 6900
Latin-Amerika: +55 11 33 55 33 70
Franciaország: +33-800-67-60-30
E-mail: support@brainlab.com

SZERZŐI JOG:

Az útmutató szerzői jogvédelem alatt álló szabadalmaztatott információkat tartalmaz. Jelen kézikönyv semmilyen része nem sokszorosítható vagy fordítható le a Brainlab kifejezett írásos engedélye nélkül.

Dokumentumváltozat: 1.0
Cikkszám: 60908-63HU

FELELŐSSÉG:

A kézikönyvet a Brainlab külön értesítés nélkül is módosíthatja, és semmilyen körülmények között sem tekinthető a vállalat kötelezettségvállalásaként. További információkért kérjük, olvassa el a „Felelősség korlátozása” című fejezetet a Brainlab általános értékesítési feltételeiben.

