

KOLIBRI


Kolibri 2.x



COMPONENTI DEL SISTEMA KOLIBRI

- Telecamere ①.
- Supporto mobile per telecamere ②.
- Workstation del sistema Kolibri ③.
- Carrello del sistema Kolibri ④.

NOTA. Le componenti delle telecamere sono molto sensibili. Eventuali urti o cadute delle telecamere potrebbero causare calibrazioni inattendibili.

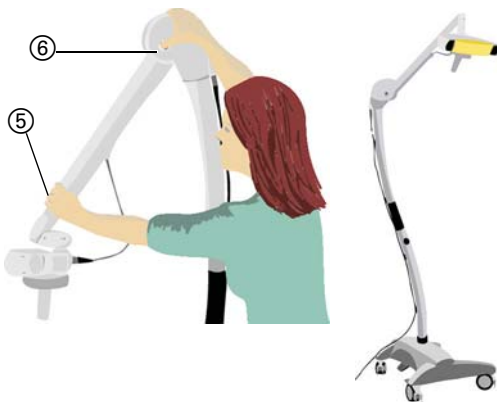

POSIZIONAMENTO SUPPORTO MOBILE

- Afferrare il braccio delle telecamere ⑤.
- Premere il pulsante di rilascio ⑥ (se il braccio delle telecamere è bloccato) e portare il braccio delle telecamere in posizione operatoria.

NOTA. Per parcheggiare/riporre il supporto mobile per telecamere, ripiegare il braccio delle telecamere.



ACCENSIONE DEL CARRELLO DEL SISTEMA KOLIBRI

- Inserire il cavo di alimentazione sul retro del carrello e ruotare il connettore ① in senso orario fino a quando non si blocca.




- Accendere l'interruttore del gruppo di continuità sul lato del carrello.




ACCENSIONE DELLA WORKSTATION DEL SISTEMA KOLIBRI

- Collegare il cavo delle telecamere all'apposita porta.
- Inserire il cavo di alimentazione del carrello sul retro della workstation.
- Accendere l'interruttore di alimentazione sul retro della workstation.
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento sulla parte anteriore della workstation.

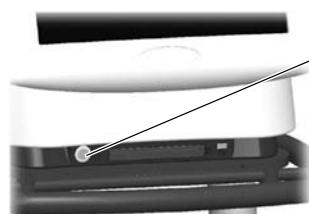

Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell'utente.

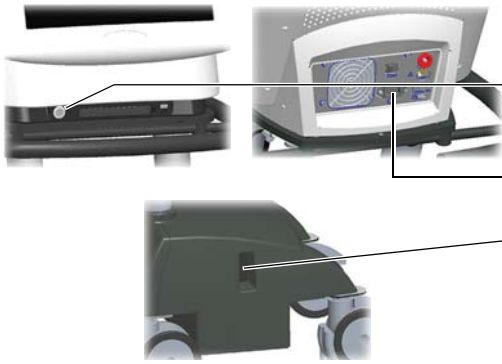


SPEGNIMENTO DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA KOLIBRI

- Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento sulla parte anteriore della workstation e attendere il completo spegnimento.
- Spegner l'interruttore di alimentazione sul retro della workstation.
- Spegner l'interruttore del gruppo di continuità sul lato del carrello.



APPLICAZIONE DEL SUPPORTO MOBILE PER TELECAMERE AL CARRELLO DEL SISTEMA KOLIBRI

- Portare il braccio delle telecamere a 90° sul supporto mobile per telecamere, fino a quando non si blocca in posizione.
- Piegar completamente le telecamere verso l'interno.
- Aprire tutti e quattro i freni delle ruote ① sul supporto mobile per telecamere.
- Aprire il meccanismo di blocco ② premendo verso il basso il pedale di rilascio ③ sul supporto mobile per telecamere.
- Spingere il supporto mobile per telecamere nel carrello. Il meccanismo di blocco si blocca automaticamente.

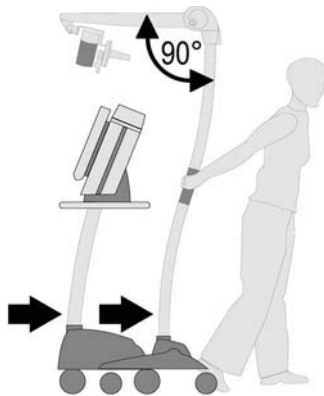

PARCHEGGIO E SPOSTAMENTO DEL SISTEMA

- Portare il braccio delle telecamere a 90° sul supporto mobile per telecamere, fino a quando non si blocca in posizione.
- Spostamento: aprire tutti i freni delle ruote (supporto mobile delle telecamere e carrello). Afferrare l'impugnatura del supporto mobile per telecamere e tirare il supporto e il carrello fino alla posizione desiderata.
- Parcheggio: bloccare tutti i freni delle ruote.

NOTA. Per evitare danni al sistema, proteggere tutte le componenti contro cadute o impatti.



Temperatura

Di esercizio
10-32 °C

Conservazione
-10-45 °C



Umidità

Di esercizio
20-80%
non condensante

Conservazione
10-90%
non condensante



Alimentazione

- Tensione = 100-120 VCA/
200-240 VCA.
- Frequenza = 50/60 Hz.
- Assorbimento = 3 A a 110/
1,5 A a 230 VCA.

INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Europa, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
USA e Canada: +1 800 597 5911
Giappone: +81 3 3769 6900
America Latina: +55 11 33 55 33 70
Francia: +33-800-67-60-30

e-mail: support@brainlab.com

DIRITTI D'AUTORE:

Questo manuale contiene informazioni esclusive protette dalla legge sui diritti d'autore.
Ne sono vietate la riproduzione, traduzione o trasmissione, del tutto o in parte, senza un'espressa autorizzazione da parte di Brainlab.
Revisione del documento: 1.0
Numero di articolo: 60908-63IT

OBBLIGHI:

La presente guida è soggetta a modifiche senza preavviso e non costituisce un impegno da parte di Brainlab.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Limitazioni di responsabilità" dei Termini e condizioni generali di vendita Brainlab.