

KOLIBRI


Kolibri 2.x



COMPONENTES DO SISTEMA KOLIBRI

- Câmera ①.
- Suporte móvel da câmara ②.
- Estação de trabalho Kolibri ③.
- Carro para Transporte Kolibri ④.


OBSERVAÇÃO. Os componentes da câmara são muito sensíveis. Quedas ou solavancos podem causar a descalibração da câmara.

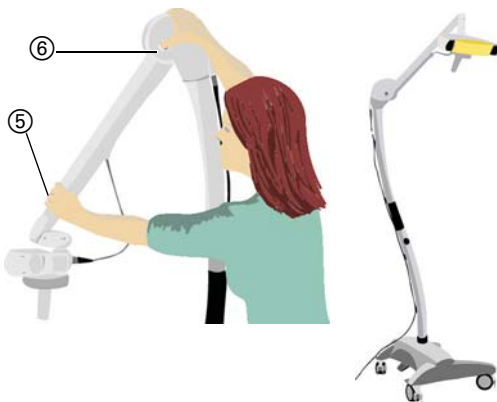

POSICIONAMENTO DO SUPORTE DA CÂMARA

- Segure o braço da câmara ⑤.
- Pressione o botão de libertação ⑥ (se o braço da câmara estiver bloqueado) e coloque o braço da câmara na posição de funcionamento.

OBSERVAÇÃO. Para estacionar/armazenar o suporte da câmara, rebata o braço da câmara.

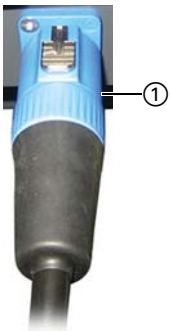

LIGAR O CARRO PARA TRANSPORTE KOLIBRI

- Ligue o cabo de alimentação à parte posterior do carro e rode o conector ① no sentido dos ponteiros do relógio, até que este encaixe no receptáculo.




- Ligue a chave de alimentação da UPS, localizada na parte lateral do carro.



LIGAR A ESTAÇÃO DE TRABALHO KOLIBRI

- Ligue o cabo da câmara à porta da câmara.
- Ligue o cabo de alimentação do carro à parte posterior da estação de trabalho.
- Ligue a chave de alimentação localizada na parte posterior da estação de trabalho.
- Pressione o botão Ligar/Desligar localizado na parte frontal da estação de trabalho.

Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.

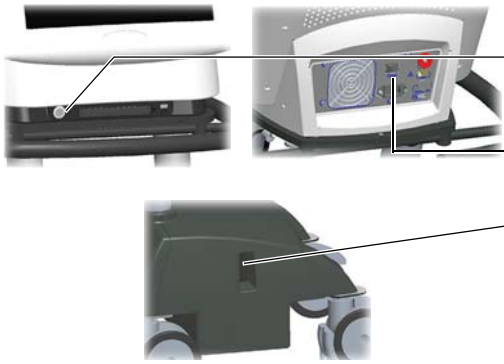


DESLIGAR COMPONENTES DO SISTEMA KOLIBRI

- Pressione o botão Ligar/Desligar localizado na parte frontal da estação de trabalho e aguarde a conclusão do encerramento.
- Desligue a chave de alimentação localizada na parte posterior da estação de trabalho.
- Desligue a chave de alimentação da UPS localizada na parte lateral do carro.



ACOPLAR O SUPORTE DA CÂMARA AO CARRO PARA TRANSPORTE KOLIBRI

- Posicione o braço da câmera a um ângulo de 90° em relação ao suporte da câmera, até que este encaixe na devida posição.
- Rebata completamente a câmera.
- Desbloqueie os travões das quatro rodas ① existentes no suporte da câmera.
- Abra o mecanismo de bloqueio ②, pressionando o pedal de libertação ③ existente no suporte da câmera.
- Pressione o suporte da câmera para este encaixar no carro de transporte. O mecanismo de bloqueio encaixa automaticamente.

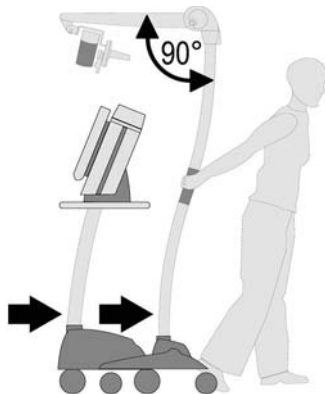

ESTACIONAR E MOVER O SISTEMA ACOPLADO

- Posicione o braço da câmera a um ângulo de 90° em relação ao suporte da câmera, até que este encaixe na devida posição.
- Para mover: abra os travões de todas as rodas (do suporte da câmera e do carro de transporte). Segure com firmeza o suporte da câmera e puxe o referido suporte e o carro de transporte para o local desejado.
- Para estacionar: bloqueie todos os travões das rodas.

OBSERVAÇÃO. Para evitar danos no sistema, proteja todos os componentes contra solavancos ou impactos.



Temperatura

Funcionamento 10-32 °C
Armazenamento -10-45 °C



Humidade

Funcionamento 20-80%
 sem condensação
Armazenamento 10-90%
 sem condensação



Alimentação

- Voltagem = 100-120 VCA/ 200-240 VCA
- Frequência = 50/60 Hz
- Consumo de energia = 3 A a 110/1,5 A a 230 VCA

INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE:

Brainlab AG
 Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany
 Europa, África, Ásia, Austrália: +49 89 99 15 68 44
 Estados Unidos e Canadá: +1 800 597 5911
 Japão: +81 3 3769 6900
 América Latina: +55 11 33 55 33 70
 França: +33-800-67-60-30
 E-mail: support@brainlab.com

DIREITOS AUTORAIS:

Este guia contém informação proprietária protegida por direitos de autor. Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da Brainlab.

Revisão do documento: 1.0
 Artigo Número: 60908-63EP

RESPONSABILIDADE:

Este guia está sujeito a alterações sem aviso prévio e não representa um compromisso por parte da Brainlab.

Para mais informações, consulte a secção "Limitações de Responsabilidade" nos Termos e Condições de Vendas Padrão da Brainlab.

