

KOLIBRI


Kolibri 2.x



COMPONENTELE KOLIBRI

- Cameră ①.
- Stativ mobil cameră ②.
- Stație de lucru Kolibri ③.
- Cărucior Kolibri ④.

NOTĂ. Componentele camerei sunt foarte sensibile. Scăparea sau zdruncinarea camerei poate genera decalibrarea acesteia.

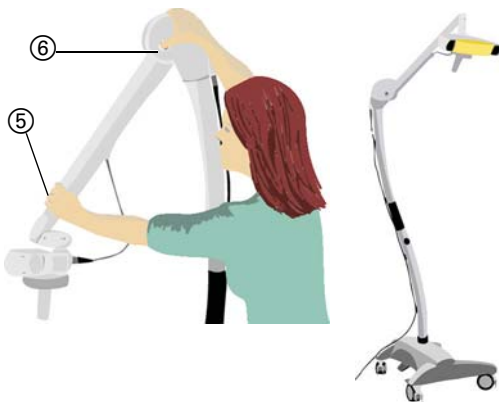

POZIȚIONAREA STATIVULUI CAMEREI

- Apucați brațul camerei ⑤.
- Apăsați butonul de eliberare ⑥ (dacă brațul camerei este blocat) și aduceți brațul camerei în poziția de utilizare.

NOTĂ. Pentru a depozita stativul camerei, pliați în jos brațul camerei.



PORNIREA CĂRUCIORULUI KOLIBRI

- Conectați cablul de alimentare în spatele căruciorului și rotiți conectorul ① în sensul acelor de ceasornic până când se înclichetează.




- Porniți alimentarea UPS-ului din partea laterală a căruciorului.



PORNIREA STAȚIEI DE LUCRU KOLIBRI

- Conectați cablul camerei la portul camerei.
- Conectați cablul de alimentare la cărucior, în partea din spate a stației de lucru.
- Porniți comutatorul de alimentare din spatele stației de lucru.
- Apăsați butonul on/off din partea din față a stației de lucru.

Notă. Acest ghid nu înlocuiește manualele de utilizare.

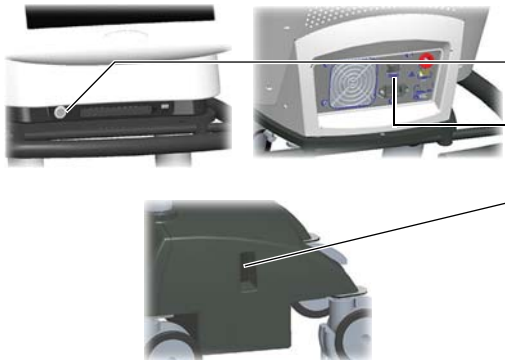


OPRIREA COMPONENTELOR KOLIBRI

- Apăsăți scurt butonul on/off din partea din față a stației de lucru și așteptați până la închiderea completă a acesteia.
- Opriți comutatorul de alimentare din partea din spate a stației de lucru.
- Opriți alimentarea UPS-ului din partea laterală a căruciorului.



CUPLAREA STATIVULUI CAMEREI LA CĂRUCIORUL KOLIBRI

- Aduceți brațul camerei la 90° de stativul camerei până când se înclișetează.
- Pliati complet camera în interior.
- Eliberați cele patru frâne ale roților ① de la stativul camerei.
- Deschideți mecanismul de blocare ② apăsând în jos pedala de eliberare ③ de la stativul camerei.
- Împingeți stativul camerei în cărucior. Mecanismul de blocare se înclișetează automat.

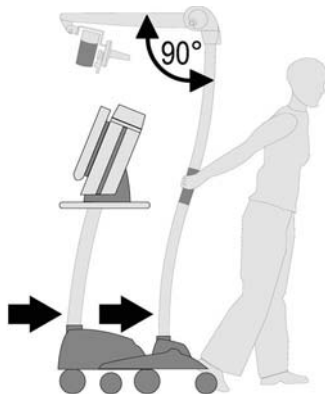

DEPOZITAREA ȘI DEPLASAREA SISTEMULUI CUPLAT

- Aduceți brațul camerei la 90° de stativul camerei până când se înclișetează.
- Deplasarea: deschideți toate frânele roților (atât de la stativul camerei, cât și de la cărucior). Țineți stativul camerei de mâner și trageți stativul și căruciorul în locația dorită.
- Depozitarea: blocați toate frânele roților.

NOTĂ. Pentru a preveni deteriorarea sistemului, protejați toate componentele de zdruccinături sau impacturi puternice.



Temperatura

de utilizare
10 – 32 °C

de depozitare
-10 – 45 °C



Umiditatea

de utilizare
20 – 80%
fără condens

de depozitare
10 – 90%
fără condens



Alimentarea

- Tensiune = 100 – 120 V c.a./
200 – 240 V c.a.
- Frecvență = 50/60 Hz
- Consum electric = 3 A @ 110/
1,5 A @ 230 V c.a.

INFORMAȚII DESPRE PRODUCĂTOR:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germania
Europa, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
SUA & Canada: +1 800 597 5911
Japonia: +81 3 3769 6900
America Latină: +55 11 33 55 33 70
Franța: +33-800-67-60-30
E-mail: support@brainlab.com

DREPTURI DE AUTOR:

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Revizie document: 1.0

Număr articol: 60908-63RO

RESPONSABILITATE:

Acest ghid este supus modificărilor fără notificare prealabilă și nu reprezintă un angajament din partea Brainlab.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Limitarea responsabilității” din Termenii și condițiile de vânzare standard Brainlab.