

# KOLIBRI


Kolibri 2.x



## COMPONENTES DE KOLIBRI

- Cámara ①
- Soporte móvil de la cámara ②
- Estación de trabajo Kolibri ③
- Carrito Kolibri ④

**NOTA:** Los componentes de la cámara son muy sensibles. Si se caen al suelo o sufren golpes, la calibración será incorrecta.

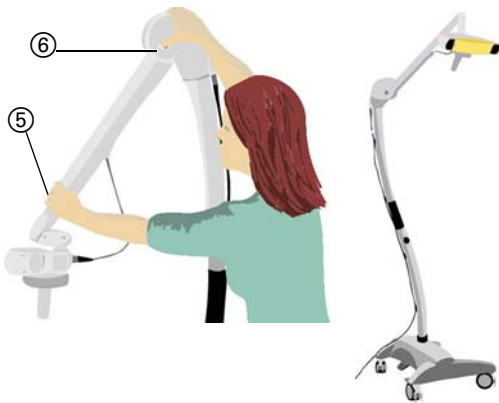

## COLOCACIÓN DEL SOPORTE DE LA CÁMARA

- Sujete el brazo de la cámara ⑤.
- Pulse el botón de desbloqueo ⑥ (si el brazo de la cámara está bloqueado) y coloque el brazo de la cámara en la posición de utilización.

**NOTA:** Para estacionar o almacenar la cámara, doble el brazo de ésta.




## ENCENDER EL CARRITO KOLIBRI

- Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del carrito y gire el conector ① en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.




- Encienda el interruptor de alimentación del SAI situado en el lateral del carrito.

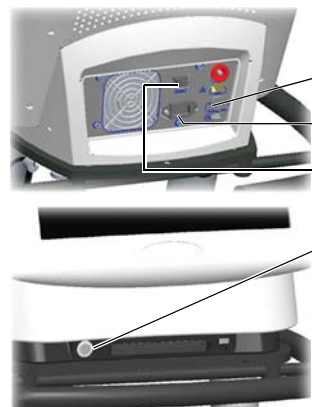

## ENCENDER LA ESTACIÓN DE TRABAJO

- Conecte el cable de la cámara al puerto de ésta.
- Conecte el cable de alimentación del carrito a la parte posterior de la estación de trabajo.
- Encienda el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la estación de trabajo.
- Pulse el botón de encendido/apagado suave situado en la parte delantera de la estación de trabajo.

Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.

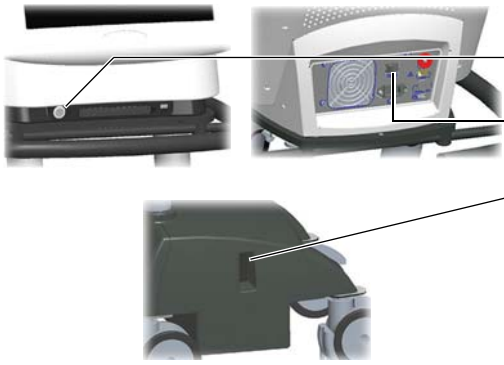


## APAGAR LOS COMPONENTES DE KOLIBRI

- Pulse brevemente el botón de apagado de la parte delantera de la estación y espere hasta que se apague.
- Apague el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la estación de trabajo.
- Apague el interruptor de alimentación del SAI situado en el lateral del carrito.



## ACOPLAR EL SOPORTE DE CÁMARA AL CARRITO

- Coloque el brazo de la cámara de modo que forme 90° con el soporte de la cámara y encaje.
- Pliegue por completo la cámara hacia dentro.
- Desbloquee los frenos de las 4 ruedas ① de la cámara.
- Desbloquee el mecanismo de cierre ②. Para ello, apriete el pedal de desbloqueo ③ del soporte de la cámara hacia abajo.
- Empuje el soporte de la cámara dentro del carrito. El mecanismo de cierre encaja automáticamente.

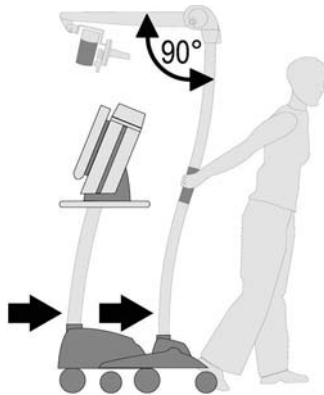

## ESTACIONAR/DESPLAZAR EL SISTEMA ACOPLADO

- Coloque el brazo de la cámara de modo que forme 90° con el soporte de la cámara y encaje.
- Desplazamiento: Desbloquee todos los frenos (soporte de cámara y carrito). Sujete el mango del soporte de la cámara y tire de éste y del carrito para transportarlos.
- Estacionamiento: Bloquee todos los frenos.

**NOTA:** Para evitar que el sistema sufra daños, no someta a los componentes a fuertes sacudidas ni choques.



### Temperatura

#### Sistema

10 °C - 32 °C  
(50 °F - 90 °F)

#### Almacenamiento

-10 °C - 45 °C  
(14 °F - 113 °F)



### Humedad

#### Sistema

20% - 80%  
sin condensación

#### Almacenamiento

10% - 90%  
sin condensación



### Alimentación

- Voltaje = 100-120 V c.a. / 200-240 V c.a.
- Frecuencia = 50 / 60 Hz
- Consumo de energía = 3 A @ 110 / 1,5 A @ 230 V c.a.

#### FABRICANTE:

Brainlab AG  
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich - Alemania  
Europa, África, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44  
EE.UU. y Canadá: +1 800 597 5911  
Japón: +81 3 3769 6900  
América Latina: +55 11 33 55 33 70  
Francia: +33-800-67-60-30  
E-mail: support@brainlab.com

#### COPYRIGHT:

Este documento contiene información protegida por copyright. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o traducida sin la autorización escrita expresa de Brainlab.

Edición: 1.0

Nº de artículo: 60908-63ES

#### RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso y no implica la aceptación de ningún tipo de responsabilidad por parte de Brainlab.

Más información en las "Limitaciones de responsabilidad" de las Condiciones de Venta de Brainlab.

