

如何使用 ORIGIN SERVER


软件版本：Origin Server 1.1



登录


- 打开浏览器。
- 输入 **Origin Server** URL。标准访问请遵循以下格式：
<https://<FQDN 服务器>.<医院域>>
例如 <https://iplannet.childrenshope.org>。
- 在 **Login** 选项卡中，输入您的凭据，然后单击 **LOG IN**。

注：要访问其它文档，请按 **Origin Server Connection Portal** 顶部的 **Help** 按钮。

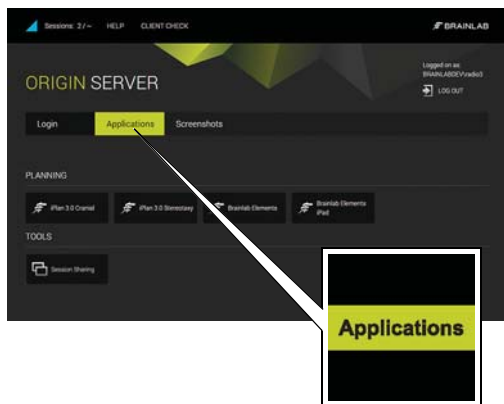

启动 ORIGIN SERVER

- 单击 **Applications** 选项卡上相关的应用程序按钮，从而启动 **Origin Server**。
- 执行相关的术前计划。

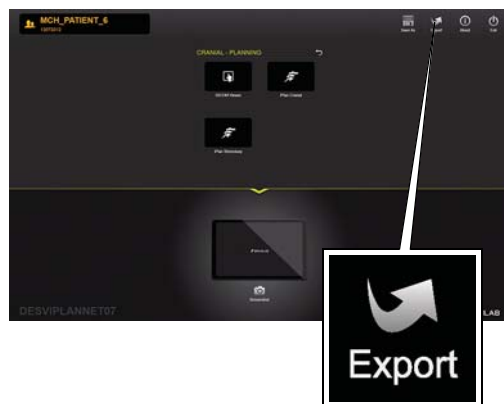


导出数据

- 选择 **Export** 导出您的计划数据。
- 等待数据传输成功完成。

任何浏览器和连接类型均可执行导出任务。然而：

- 使用 Internet Explorer 时，USB 导出必须在 ActiveX 模式下进行。
- 对于使用 RDP 模式的所有其他浏览器，应在连接之前插入 USB 闪存驱动器。
- 也可使用 HTML5 导出，但必须首先选择预配置的网络文件夹。

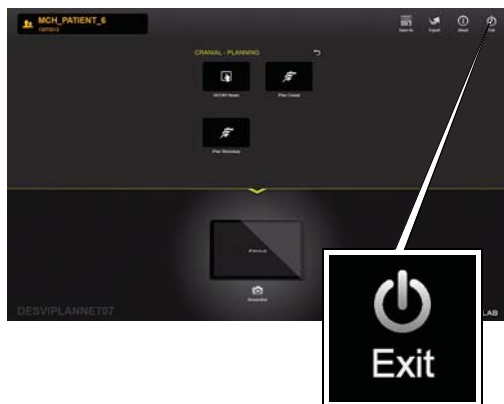


退出 ORIGIN SERVER

- 结束后，在应用程序中选择 **Done**。
- 您计划的数据现在即可用于患者治疗。
- 选择 **Exit**。


启用会话共享

软件版本：Origin Server 1.1

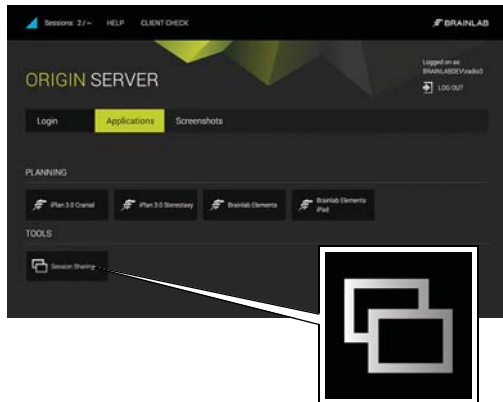

启动会话共享

- 单击 **Applications** 选项卡中的 **Session Sharing**。
Session Sharing 对话框打开，其中列出了所有的活动会话。

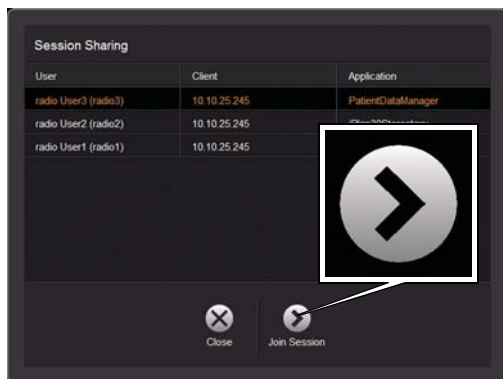

加入会话

- 选择所需的会话，然后单击 **Join Session**。
- 根据提示接受会话。

注：现在，会话所有者和访客用户均可使用软件的完整功能，并查看彼此执行的所有步骤。



断开会话

- 要退出共享的会话，单击屏幕右下方的 **Disconnect**。

注：断开时，应用程序继续运行而不会关闭。

在平板电脑上使用 ORIGIN SERVER

软件版本：Origin Server 1.1




登录

- 打开兼容 HTML5 的浏览器。
- 使用平板电脑设备上的网页浏览器导航至 **Origin Server**。标准访问请遵循以下格式：
<https://<FQDN 服务器>.<医院域>>
例如 <https://iplanet.childrenshope.org>。
- 在 **Login** 选项卡中，输入您的凭据，然后单击 **LOG IN**。

注：需要无线访问服务器。

注：Brainlab 建议使用 Safari。

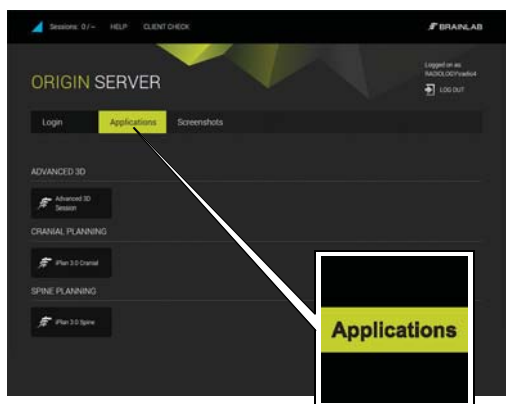

选择应用程序

- 例如，启动 **Brainlab Elements iPad**。
- 启动应用程序的方法是单击 **Applications** 选项卡上相关的应用程序按钮。
- 执行相关的术前计划。


注：请勿将平板电脑用于诊断。平板电脑仅用于查看信息。



添加到主屏幕 - 第 1 步

- 选择菜单图标 ①。
菜单打开。
- 选择添加到主屏幕图标 ②。

注：建议在全屏模式下查看 **Origin Server** 以实现最佳显示效果。向主屏幕添加服务器 URL 以确保 **Origin Server** 每次都在全屏模式下打开。

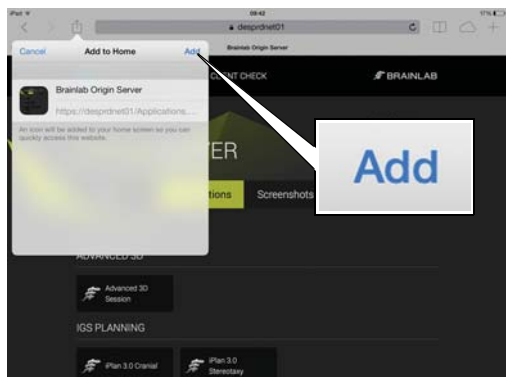


添加到主屏幕 - 第 2 步

- 从对话框选择添加。
向主屏幕添加了一个图标。



启动 ORIGIN SERVER

- 从主屏幕选择您创建的图标以启动 **Origin Server**。

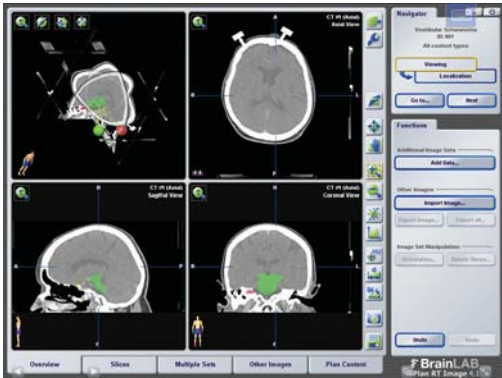

查看

- 建议使用支持全屏查看的浏览器。

注： 确切的显示功能取决于浏览器，所选的应用程序不一定总能与屏幕大小完全匹配。

注： 在手术计划过程中，不应使用浏览器的后退和前进导航键。



激活键盘

- 从覆盖菜单中选择键盘图标，以激活键盘。

注： 具体功能取决于浏览器。

版权:

本指南包含受版权保护的专有信息。
未经 Brainlab 明确书面许可，严禁复制或翻译本指南的任何部分。

文档修订版: 1.0

货号: 60917-10ZH

责任:

本指南如有更改，恕不另行通知；并且不代表 Brainlab 的任何承诺。

有关更多信息，请参阅《Brainlab 标准销售条款和条件》的“责任限制”章节。

