



# СГЛОБЯВАНЕ НА VARIOGUIDE

Хардуер: VarioGuide

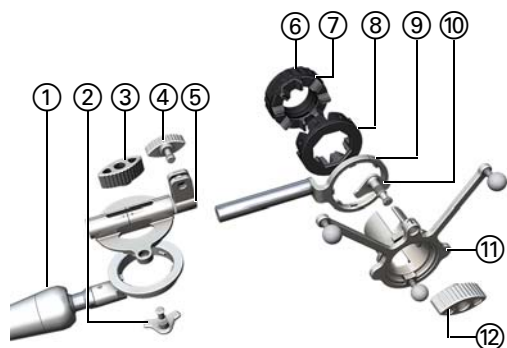

## КОМПОНЕНТИ НА VARIOGUIDE


- ① Рамо
- ② Закопчалка на шарнир 1 (**Joint 1**), ③ винт на шарнир 1, ④ винт на шарнир 2 (**Joint 2**)
- ⑤ Дисков шарнир
- ⑥ Външен диск, ⑦ фиксиращ пръстен, ⑧ вътрешен диск
- ⑨ Държач на установката за проследяване
- ⑩ Закопчалка на шарнир 3 (**Joint 3**)
- ⑪ Установка за проследяване
- ⑫ Винт на шарнир 3

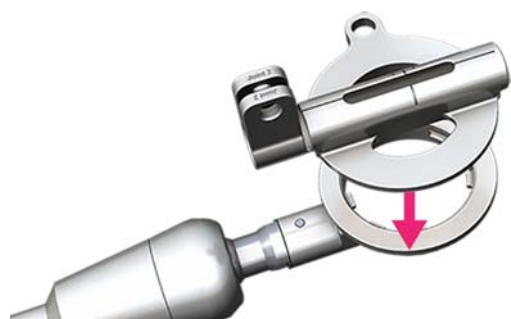

## СТЪПКА 1

- Поставете дисковия шарнир върху пръстена на рамото на **VarioGuide**.
- Не забравяйте да напаснете зъбците на пръстена към вдлъбнатините на дисковия шарнир.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможна е само една ориентация (показана е).

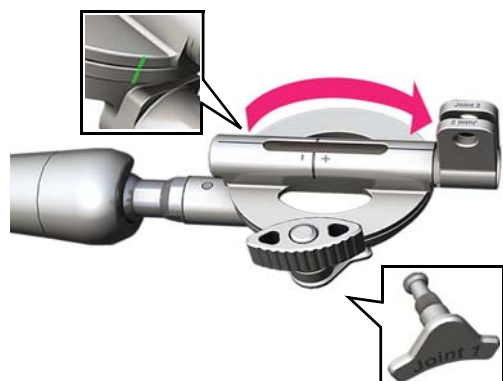


## СТЪПКА 2

- Завъртете дисковия шарнир на 180° към показаната позиция, така че двете линии да са подравнени.
- Поставете закопчалката на шарнир 1 и позиционирайте закопчалката по такъв начин, че да застане към пръстена на рамото на **VarioGuide**.
- Фиксирайте шарнир 1, като затегнете винта по часовниковата стрелка.




## СТЪПКА 3

- Поставете винта на шарнир 2 само частично вътре в дисковия шарнир.
- Завийте държача на установката за проследяване навътре, докато можете да го плъзгате свободно по протежение на долната част на дисковия шарнир.

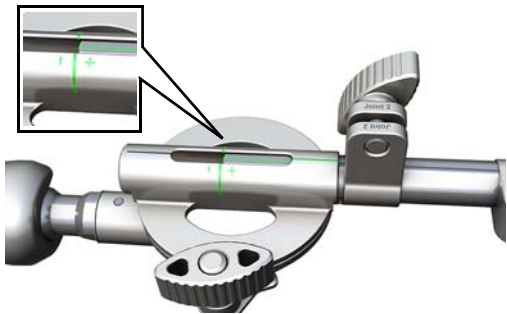

#### СТЪПКА 4


- Плъзнете държача на установката за проследяване вътре в дисковия шарнир, докато линиите на двата компонента се подравнят.
- Затегнете винта на **шарнир 2**, за да фиксирате държача на установката за проследяване към дисковия шарнир.

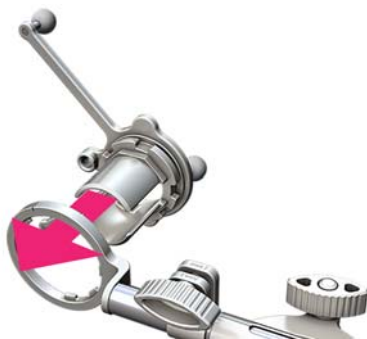

#### СТЪПКА 5


- Поставете установката на **VarioGuide** върху държача на установката за проследяване.
- Не забравяйте да напаснете зъбците на пръстена на държача на установката за проследяване към вдлъбнатините на установката.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможна е само една ориентация (показана е).

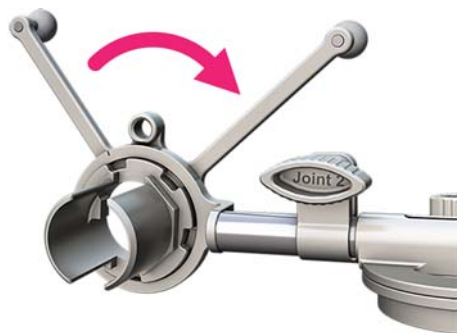

#### СТЪПКА 6

- Завъртете установката на **VarioGuide** на 90° според показаното.

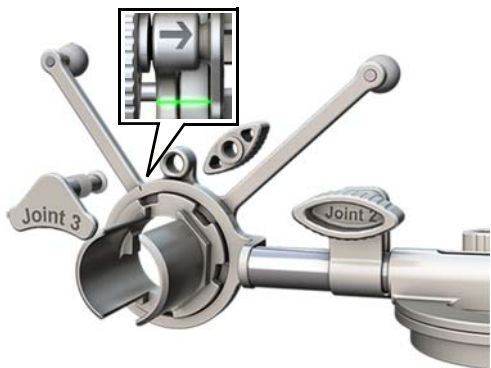

#### СТЪПКА 7

- Поставете закопчалката на **шарнир 3** и позиционирайте закопчалката по такъв начин, че да застане към пръстена на държача на установката за проследяване.
- Регулирайте по такъв начин, че линиите на двата компонента да са подравнени.
- Фиксирайте **шарнир 3**, като затегнете винта по часовниковата стрелка.

# СГЛОБЯВАНЕ НА VARIOGUIDE

Хардуер: VarioGuide



## СТЪПКА 8

- Изберете дисковия набор, който съдържа нужния диаметър.
- Поставете вътрешния диск върху установката на **VarioGuide**.
- Подравнете нужния диаметър на вътрешния диск към стрелката върху установката.
- Натиснете вътрешния диск, докато щракне на позиция.



## СТЪПКА 9

- Сглобете фиксиращия пръстен ① към външния диск ②.
- Подравнете линията върху фиксиращия пръстен с линията върху вътрешния диск.



## СТЪПКА 10

- Завийте фиксиращия пръстен на място.



## СТЪПКА 11

- Сглобеният **VarioGuide** вече е в първоначална позиция.
- VarioGuide** вече може да се прикачи към държача за глава или към V-канала (независимо дали в позиция на лявото, или дясното рамо).



Brainlab AG  
Olof-Palme-Str. 9  
81829 Munich  
Германия

Европа, Африка, Азия, Австралия:  
+49 89 99 15 68 1044  
САЩ и Канада: +1 800 597 5911  
Япония: +81 3 3769 6900  
Латинска Америка: +55 11 33 55 33 70  
Франция: +33-800-67-60-30  
Имейл: support@brainlab.com

#### АВТОРСКО ПРАВО:

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното писмено съгласие на Brainlab.

Редакция на документа: 1.1

Номер на артикул: 60903-42BG

#### ОТГОВОРНОСТ:

Това ръководство подлежи на промени без предизвестие и не представлява ангажимент от страна на Brainlab.

За допълнителна информация направете справка с раздела „Ограничения на отговорността“ в Стандартните правила и условия за продажби на Brainlab.

