



VARIOGUIDE MONTEREN

Hardware: VarioGuide

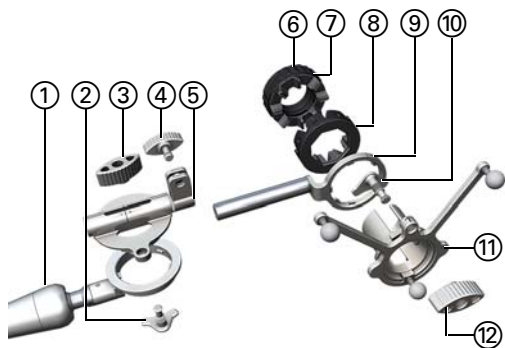

VARIOGUIDE-COMPONENTEN


- ① Arm
- ② Vergrendeling van **Joint 1**, ③ schroef van **Joint 1**, ④ schroef van **Joint 2**
- ⑤ Schijfgewricht
- ⑥ Buitenste schijf, ⑦ vergrendelring, ⑧ binnenste schijf
- ⑨ Houder volgframe
- ⑩ Vergrendeling van **Joint 3**
- ⑪ Volgframe
- ⑫ Schroef van **Joint 3**

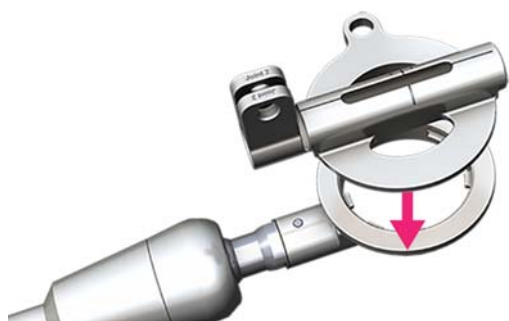

STAP 1

- Plaats het schijfgewricht op de ring van de arm van de **VarioGuide**.
- Zorg ervoor dat de tanden op de ring zijn uitgelijnd met de inkepingen in het schijfgewricht.

OPMERKING. Dit kan maar op één manier (afgebeeld).

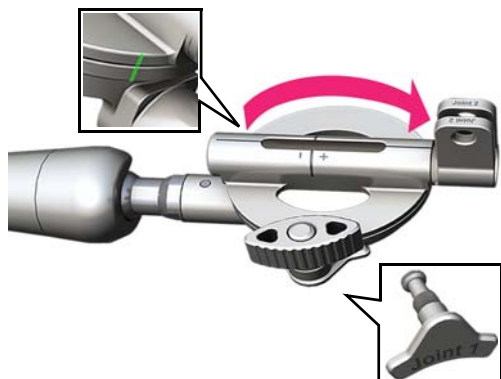


STAP 2

- Roteer het schijfgewricht 180° naar de afgebeelde positie zodat de twee lijnen worden uitgelijnd.
- Plaats de vergrendeling van **Joint 1** en positioneer deze strak tegen de ring van de arm van de **VarioGuide**.
- Zet **Joint 1** vast door de schroef naar rechts te draaien.




STAP 3

- Plaats de schroef van **Joint 2** gedeeltelijk in het schijfgewricht.
- Schroef de houder van het volgframe naar binnen totdat u deze vrij langs de onderzijde van het schijfgewricht kunt schuiven.

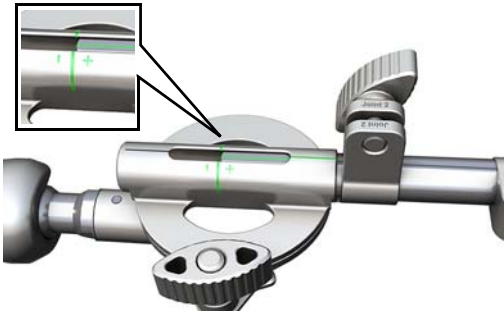

STAP 4

- Schuif de houder van het volgframe in het schijfgewricht tot de lijnen op beide componenten zijn uitgelijnd.
- Draai de schroef van **Joint 2** vast om de houder van het volgframe vast te zetten op het schijfgewricht.

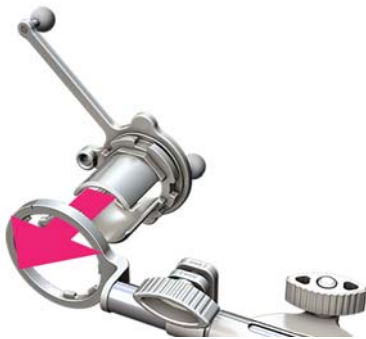


STAP 5

- Plaats het **VarioGuide**-frame op de houder van het volgframe.


Zorg ervoor dat de tanden op de ring van de houder van het volgframe zijn uitgelijnd met de inkepingen op het frame.

OPMERKING. Dit kan maar op één manier (afgebeeld).

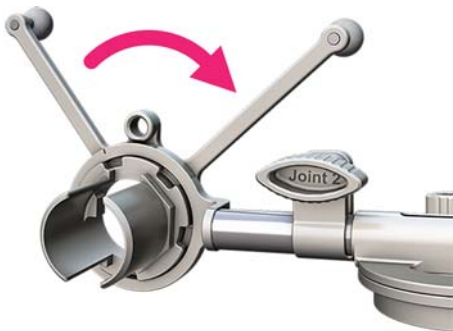

STAP 6

- Draai het **VarioGuide**-frame 90°, zoals is afgebeeld.

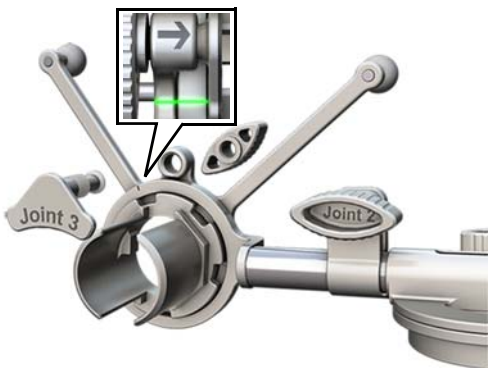

STAP 7

- Plaats de vergrendeling van **Joint 3** en positioneer deze strak tegen de ring van de houder van het volgframe.
- Pas het geheel aan zodat de lijnen op beide componenten worden uitgelijnd.
- Zet **Joint 3** vast door de schroef naar rechts te draaien.

VARIOGUIDE MONTEREN

Hardware: VarioGuide



STAP 8

- Selecteer de schijfset met de benodigde diameter.
- Plaats de binnenste schijf op het **VarioGuide**-frame.
- Lijn de benodigde diameter op de binnenste schijf uit op de pijl op het frame.
- Druk op de binnenste schijf tot deze op zijn plaats vastklikt.



STAP 9

- Monteer de vergrendelring ① op de buitenste schijf ②.
- Lijn de lijn op de vergrendelring uit met de lijn op de binnenste ring.



STAP 10

- Schroef de vergrendelring op zijn plaats.



STAP 11

- De gemonteerde **VarioGuide** bevindt zich nu in de startpositie.
- De **VarioGuide** kan nu op de hoofdsteun of de V-adapter worden bevestigd (in de positie voor de linkerarm of voor de rechterarm).



Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

Europa, Afrika, Azië, Australië: +49 89 99 15 68 44
VS en Canada: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Latijns-Amerika: +55 11 33 55 33 70
Frankrijk: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

AUTEURSRECHT:

Deze handleiding bevat auteursrechtelijk beschermde informatie. Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Documentrevisie: 1.1

Artikelnummer: 60903-42NL

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en verplicht Brainlab tot niets.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk over beperkingen van aansprakelijkheid in de standaard verkoopvoorwaarden van Brainlab.

