


ASSEMBLAGE DU VARIOGUIDE

Matériel : VarioGuide

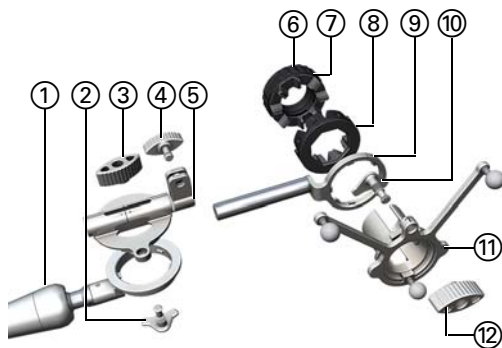


COMPOSANT DU VARIOGUIDE

- ① Bras
- ② Mécanisme de verrouillage **Articulation 1** (Joint 1),
- ③ Vis **Articulation 1**, ④ Vis **Articulation 2** (Joint 2)
- ⑤ Articulation du disque
- ⑥ Disque extérieur, ⑦ Anneau de verrouillage,
- ⑧ Disque intérieur
- ⑨ Support pour unité de suivi
- ⑩ Mécanisme de verrouillage **Articulation 3** (Joint 3)
- ⑪ Unité de suivi
- ⑫ Vis **Articulation 3**

ÉTAPE 1


- Placez l'articulation du disque sur l'anneau du bras du **VarioGuide**.
- Assurez-vous d'imbriquer les dents de l'anneau dans les indentations sur l'articulation du disque.

REMARQUE : une seule orientation est possible (voir ci-contre).

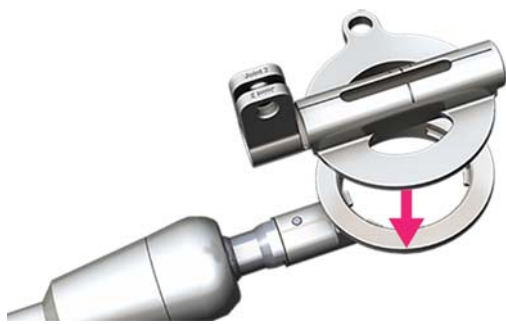

ÉTAPE 2


- Faites pivoter l'articulation du disque à 180° jusqu'à la position indiquée de sorte que les 2 lignes correspondent.
- Insérez le mécanisme de verrouillage **Articulation 1** et positionnez-le de sorte qu'il s'adapte à l'anneau du bras du **VarioGuide**.
- Stabilisez **Articulation 1** en tournant la vis dans le sens horaire.

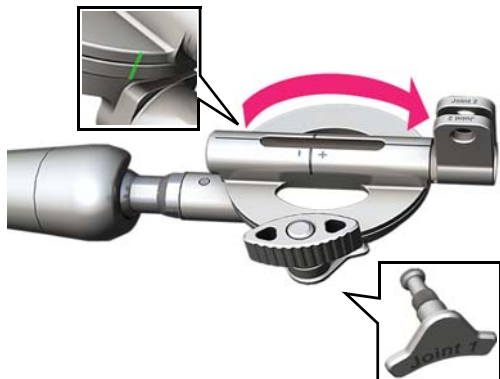

ÉTAPE 3


- Insérez la vis **Articulation 2** à mi-chemin dans l'articulation du disque.
- Vissez-y le support pour unité de suivi jusqu'à ce qu'il glisse librement jusqu'au bas de l'articulation du disque.



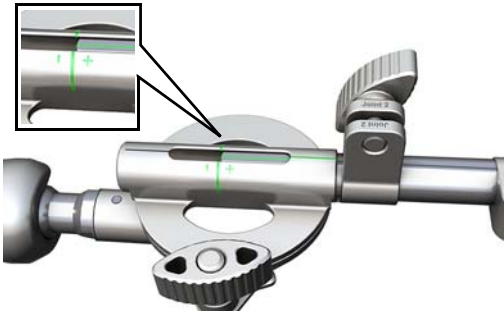

ÉTAPE 4

- Faites glisser le support pour unité de suivi dans l'articulation du disque jusqu'à ce que les lignes sur les deux composants soient alignées l'une avec l'autre.
- Serrez la vis **Articulation 2** pour stabiliser le support pour unité de suivi sur l'articulation du disque.

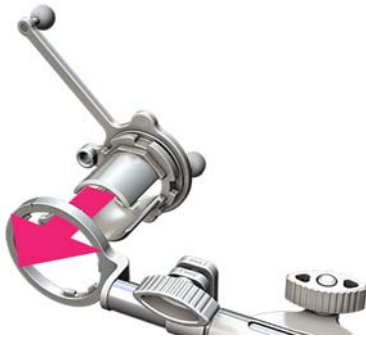


ÉTAPE 5

- Insérez l'étoile du **VarioGuide** sur le support pour unité de suivi.


Assurez-vous d'imbriquer les dents de l'anneau du support pour unité de suivi dans les indentations sur l'étoile.

REMARQUE : une seule orientation est possible (voir ci-contre).

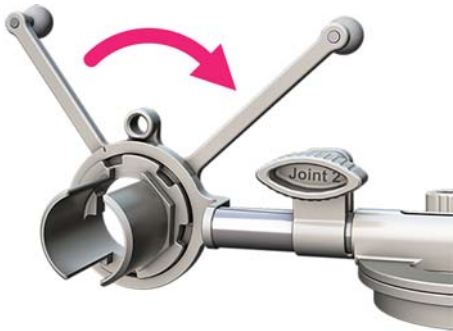

ÉTAPE 6

- Faites tourner l'étoile du **VarioGuide** à 90° comme indiqué.

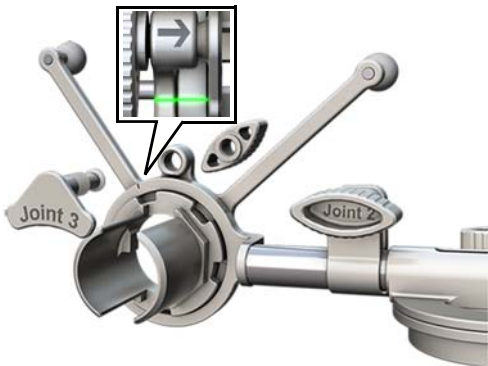

ÉTAPE 7

- Insérez le mécanisme de verrouillage **Articulation 3** de sorte qu'il s'adapte à l'anneau du support pour unité de suivi.
- Ajustez-le afin que les lignes des deux composants soient alignées l'une avec l'autre.
- Stabilisez **Articulation 3** en tournant la vis dans le sens horaire.

ASSEMBLAGE DU VARIOGUIDE

Matériel : VarioGuide



ÉTAPE 8

- Sélectionnez l'ensemble de disques qui contient le diamètre requis.
- Placez le disque intérieur sur l'étoile du **VarioGuide**.
- Alignez le diamètre requis du disque intérieur sur la flèche de l'étoile.
- Encliquez le disque intérieur dans cette position.



ÉTAPE 9

- Fixez l'anneau de verrouillage ① sur le disque extérieur ②.
- Alignez la ligne de l'anneau de verrouillage sur la ligne du disque extérieur.



ÉTAPE 10

- Vissez l'anneau de verrouillage en place.



ÉTAPE 11

- Le **VarioGuide** assemblé est maintenant en position initiale. Le **VarioGuide** peut maintenant être raccordé à la tête ou à l'adaptateur en V (en position de bras à gauche ou à droite).



Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

Europe, Afrique, Asie, Australie : +49 89 99 15 68 44
États-Unis et Canada : +1 800 597 5911
Japon : +81 3 3769 6900
Amérique latine : +55 11 33 55 33 70
France : +33-800-67-60-30

E-mail : support@brainlab.com

DROIT D'AUTEUR :

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d'auteur. La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent guide requiert l'autorisation expresse et écrite de Brainlab.

Révision du document : 1.1

Numéro d'article : 60903-42FR

RESPONSABILITÉ :

Ce guide est sujet à des changements sans avis préalable et ne constitue pas un engagement de la part de Brainlab.

Pour de plus amples informations, voir la section Limite de responsabilité dans les Conditions générales de ventes de Brainlab.

