



VARIOGUIDE — MONTAŻ

Elementy metalowe: VarioGuide

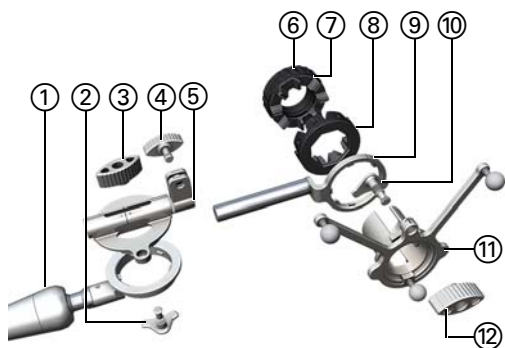

ELEMENTY SKŁADOWE VARIOGUIDE


- ① Ramię
- ② Blokada **Złącze 1**, ③ Śruba **Złącze 1**, ④ Śruba **Złącze 2**
- ⑤ Złącze krążkowe
- ⑥ Krążek zewnętrzny, ⑦ Pierścień blokujący, ⑧ Krążek wewnętrzny
- ⑨ Uchwyt układu wykrywania
- ⑩ Blokada **Złącze 3**
- ⑪ Układ wykrywania
- ⑫ Śruba **Złącze 3**

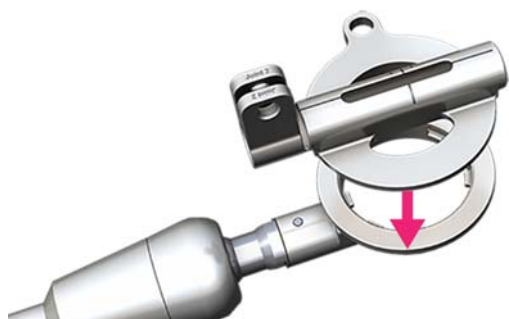

KROK 1

- Nałożyć złącze krążkowe na pierścień ramienia **VarioGuide**.
- Upewnić się, że zęby na pierścieniu pasują do nacięć na złączu krążkowym.

UWAGA: Prawidłowy montaż jest możliwy tylko w jednej orientacji (patrz rysunek).

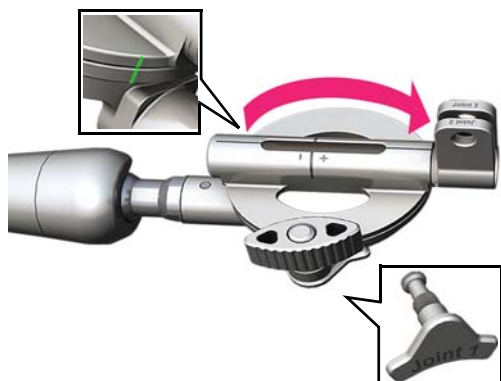


KROK 2

- Obrócić złącze krążkowe o 180° w położenie przedstawione na rysunku tak, aby wyrównać 2 linie.
- Włożyć blokadę **Złącza 1** i umieścić ją w taki sposób, aby pasowała do pierścienia ramienia **VarioGuide**.
- Zabezpieczyć blokadę **Złącza 1**, dokręcając nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




KROK 3

- Wprowadzić śrubę **Złącza 2** do połowy do złącza krążkowego.
- Wkręcać uchwyt układu wykrywania, aż będzie możliwe jego swobodne przesuwanie wzdłuż dołu złącza krążkowego.

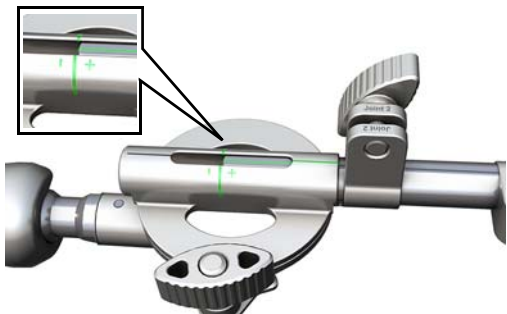

KROK 4

- Wsuwać uchwyt układu wykrywania do złącza krążkowego aż do wyrównania się linii na obydwu elementach.
- Dokręcić śrubę **Złącza 2**, aby zamocować uchwyt układu wykrywania do złącza krążkowego.

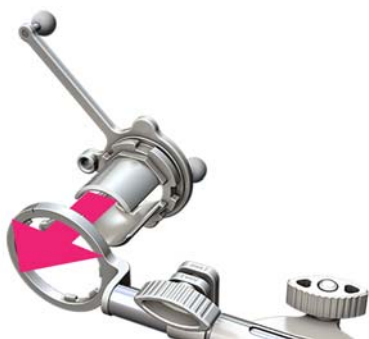


KROK 5

- Nałożyć układ **VarioGuide** na uchwyt układu wykrywania.


Upewnić się, że zęby na pierścieniu uchwytu układu wykrywania pasują do nacięć na układzie.

UWAGA: Prawidłowy montaż jest możliwy tylko w jednej orientacji (patrz rysunek).

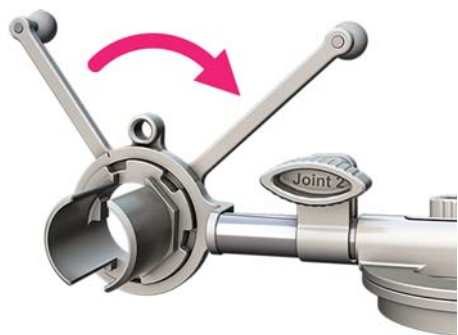

KROK 6

- Przekręcić układ **VarioGuide** o 90° jak na rysunku.

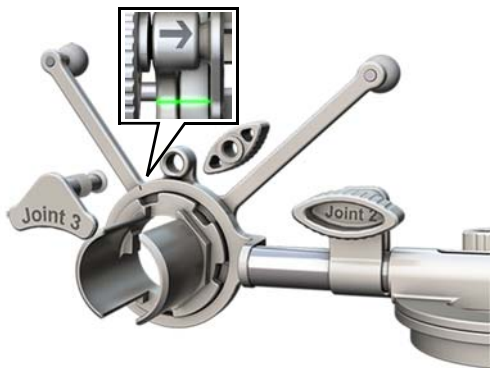

KROK 7

- Włożyć blokadę **Złącza 3** i umieścić ją w taki sposób, aby pasowała do uchwytu układu wykrywania.
- Wyregulować tak, aby wyrównać linie na obu elementach.
- Zabezpieczyć **Złącze 3**, dokręcając nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

VARIOGUIDE — MONTAŻ

Elementy metalowe: VarioGuide



KROK 8

- Wybrać zestaw krążka, który zawiera wymaganą średnicę.
- Założyć wewnętrzny krążek układu **VarioGuide**.
- Wyrównać wymaganą średnicę na krążku wewnętrznym ze strzałką na układzie.
- Wcisnąć krążek wewnętrzny, aż wskoczy na miejsce.



KROK 9

- Zamontować pierścień blokujący ① na krążku zewnętrznym ②.
- Wyrównać linię na pierścieniu blokującym z linią na krążku wewnętrznym.



KROK 10

- Przykręcić pierścień blokujący.



KROK 11

- Zamontowany system **VarioGuide** znajduje się teraz w położeniu początkowym.

System **VarioGuide** można teraz zamocować do uchwyty głowy lub elementu V-kształtnego (w lewym lub prawym położeniu ramienia).



Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy

Europa, Afryka, Azja, Australia: +49 89 99 15 68 1044
USA i Kanada: +1 800 597 5911
Japonia: +81 3 3769 6900
Ameryka Środkowa: +55 11 33 55 33 70
Francja: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

PRAWA AUTORSKIE:

Niniejsza instrukcja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Kopiowanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Wersja dokumentu: 1.1

Numer artykułu: 60903-42PL

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą być zmieniane bez uprzedzenia i nie stanowią jakiegokolwiek zobowiązania firmy Brainlab.

Informacje dodatkowe – patrz część „Ograniczenie odpowiedzialności” Standardowych Warunków Sprzedaży firmy Brainlab.

