


ASAMBLAREA VARIOGUIDE

Echipament: VarioGuide

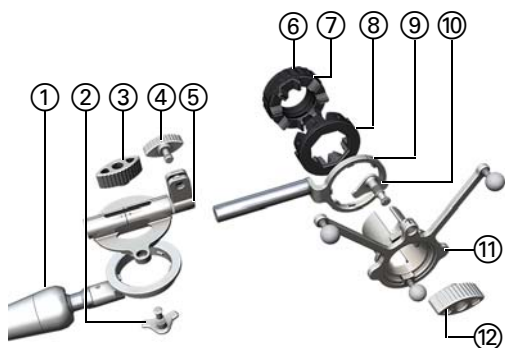


COMPONENTE VARIOGUIDE

- ① Braț
- ② Încuietoarea **Articulației 1** (Joint 1), ③ șurub **Articulație 1**, ④ șurub **Articulație 2** (Joint 2)
- ⑤ Articulație disc
- ⑥ Disc exterior, ⑦ Inel de blocare, ⑧ Disc interior
- ⑨ Suportul matricei de ghidare
- ⑩ Încuietoarea **Articulației 3** (Joint 3)
- ⑪ Matrice de ghidare
- ⑫ Șurubul **Articulației 3**

ETAPA 1


- Amplasați articulația discului pe inelul brațului **VarioGuide**.
- Asigurați-vă că potriviți dinții de pe inel pe indentațiile de pe articulația discului.

NOTĂ: O singură orientare posibilă (în imagine).

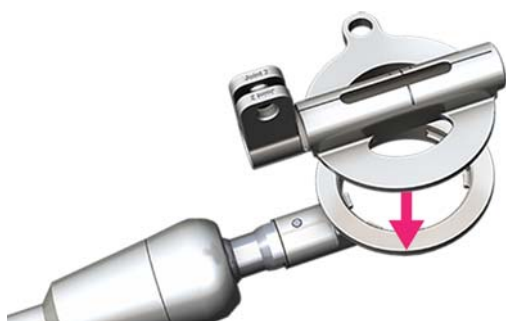

ETAPA 2


- Rotiți articulația discului la 180° față de poziția prezentată, astfel încât cele 2 linii să fie aliniată.
- Introduceți încuietoarea **Articulației 1** și poziționați-o, astfel încât să se fixeze pe inelul brațului **VarioGuide**.
- Fixați **Articulația 1** prin strângere în sens orar.

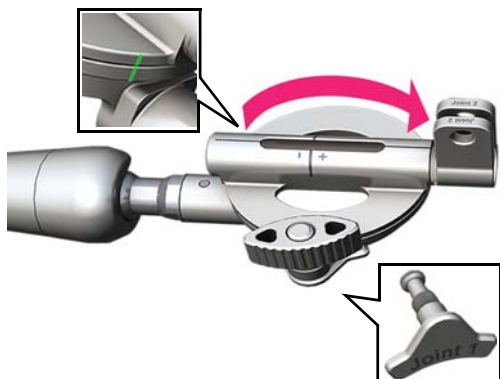

ETAPA 3


- Introduceți parțial șurubul **Articulației 2** în articulația discului.
- Înșurubați suportul matricei de ghidare până când îl puteți glisa liber de-a lungul părții inferioare a articulației discului.



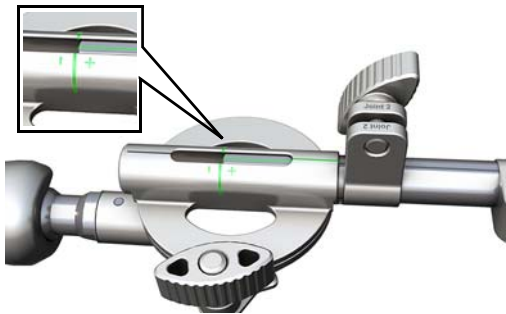

ETAPA 4

- Glisați suportul matricei de ghidare în articulația discului până când se aliniază liniile ambelor componente.
- Strângeți șurubul **Articulației 2** pentru a fixa suportul matricei de ghidare pe articulația discului.

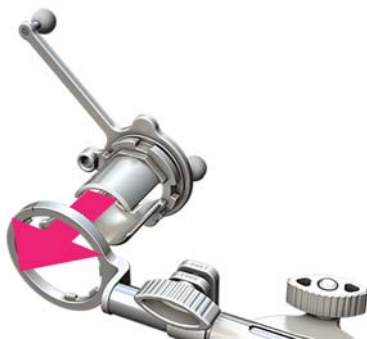


ETAPA 5

- Amplasați matricea **VarioGuide** pe suportul matricei de ghidare.


Asigurați-vă că potriviți dinții de pe inelul suportului matricei de ghidare cu indentațiile de pe matrice.

NOTĂ: O singură orientare posibilă (în imagine).

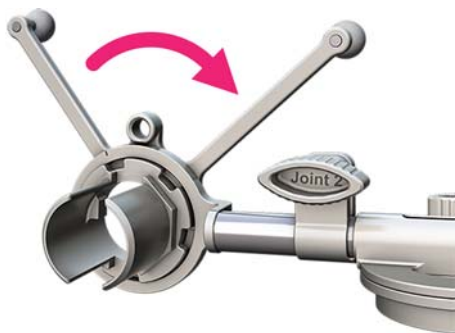

ETAPA 6

- Rotiți matricea **VarioGuide** la 90°, conform ilustrației.

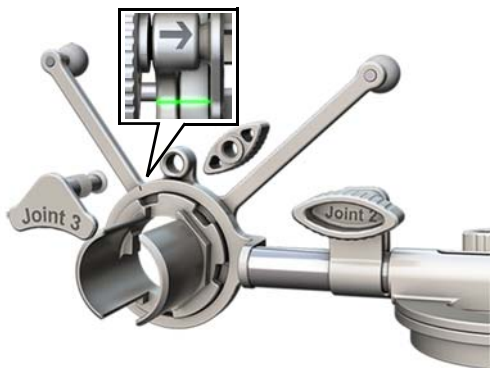


ETAPA 7

- Introduceți încuietoarea **Articulației 3** și poziționați-o, astfel încât să se fixeze pe inelul suportului matricei de ghidare.
- Ajustați, astfel încât să se alinieze liniile ambelor componente.
- Fixați **Articulația 3** prin strângere în sens orar.

ASAMBLAREA VARIOGUIDE

Echipament: VarioGuide

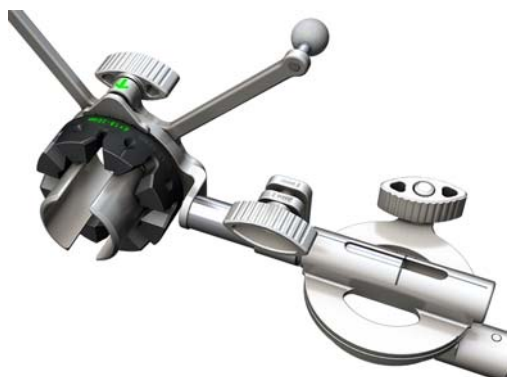

ETAPA 8

- Selectați setul discului care conține diametrul necesar.
- Amplasați discul interior pe matricea **VarioGuide**.
- Aliniați diametrul necesar de pe discul interior cu săgeata de pe matrice.
- Apăsați discul interior până când acesta se fixează pe poziție.



ETAPA 9

- Asamblați inelul de blocare ① pe discul exterior ②.
- Aliniați linia de pe inelul de blocare cu linia de pe discul interior.




ETAPA 10

- Înșurubați inelul de blocare pe poziție.



ETAPA 11

- **VarioGuide** asamblat este acum pe poziția inițială. Acum **VarioGuide** poate fi atașat la suportul pentru cap sau Inserția în-V (în poziție pentru brațul pe partea stângă sau partea dreaptă).

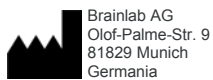

Europa, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
SUA și Canada: +1 800 597 5911
Japonia: +81 3 3769 6900
America Latină: +55 11 33 55 33 70
Franța: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

DREPTURI DE AUTOR:

Acest ghid conține informații sub drept de proprietate și protejate de drepturile de autor. Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab.

Revizie document: 1.1

Număr articol: 60903-42RO

RĂSPUNDERE:

Acest ghid este supus modificărilor fără notificare prealabilă și nu reprezintă un angajament din partea Brainlab.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Limitările răspunderii” din Termenii și condițiile de vânzare standard ale Brainlab.

