


MONTAJE DE VARIOGUIDE

Equipamiento: VarioGuide

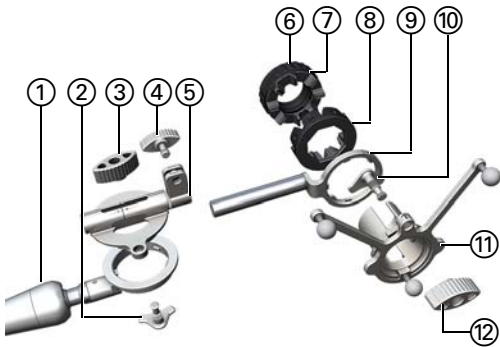

COMPONENTES DE VARIOGUIDE

① Brazo

Cierre **Joint 1** ②, tornillo **Joint 1** ③, tornillo **Joint 2** ④

⑤ Articulaciones de disco


⑥ Disco externo, ⑦ Anillo de cierre, ⑧ Disco interno

⑨ Soporte de la estrella de localización

⑩ Cierre de la **Joint 3**

⑪ Estrella de localización


⑫ Tornillo de **Joint 3**

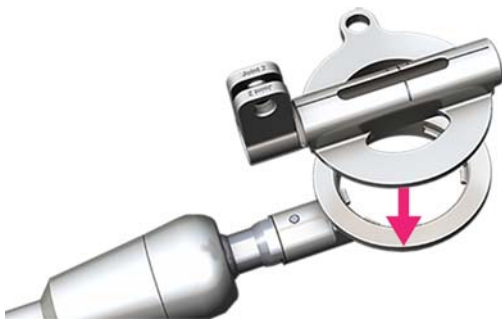

PASO 1

- Coloque la articulación de disco en el anillo del brazo de **VarioGuide**.
- Asegúrese de que los dientes del anillo encajan en las muescas de la articulación de disco.

NOTA: Solamente es posible una orientación (ver imagen).

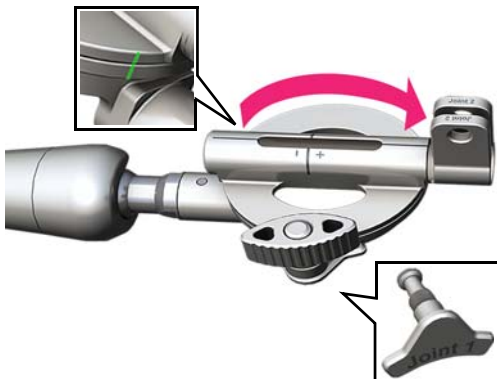


PASO 2

- Rote la articulación de disco 180° hasta alcanzar la posición que muestra la figura de forma que las 2 líneas coincidan.
- Inserte el cierre de la **Articulación 1** (Joint 1) de forma que encaje en el anillo del brazo de **VarioGuide**.
- Fije la **Articulación 1** girando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.




PASO 3

- Introduzca el tornillo de la **Articulación 2** parcialmente en la articulación de disco.
- Enrosque el soporte de la estrella de localización hasta que se pueda mover libremente por la parte inferior de la articulación de disco.

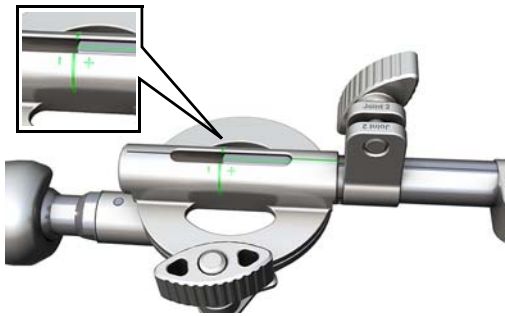

PASO 4

- Deslice el soporte de la estrella de localización en la articulación de disco hasta que las líneas grabadas en ambos componentes coincidan.
- Apriete el tornillo de la **Articulación 2** para fijar la estrella de localización a la articulación de disco.

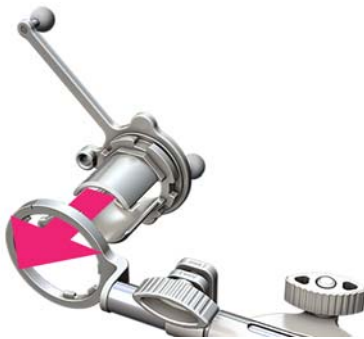


PASO 5

- Coloque la estrella de referencia de **VarioGuide** en el soporte de la estrella de localización.


Asegúrese de que los dientes del anillo del soporte encajan en las muescas de la estrella de localización.

NOTA: Solamente es posible una orientación (ver imagen).

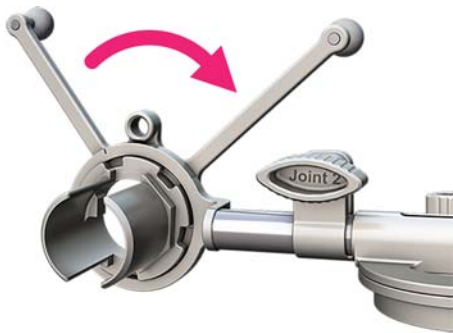

PASO 6

- Gire la estrella de **VarioGuide** 90° tal y como muestra la imagen.

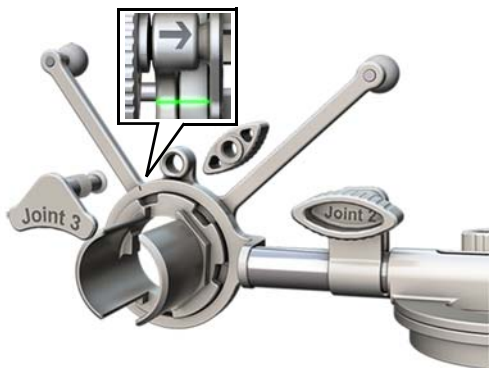


PASO 7

- Inserte el cierre de la Articulación 3 (**Joint 3**) de forma que encaje en el anillo del soporte de la estrella de localización.
- Efectúe los ajustes necesarios para que coincidan las líneas de ambos componentes.
- Fije la Articulación 3 (**Joint 3**) girando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.

MONTAJE DE VARIOGUIDE

Equipamiento: VarioGuide

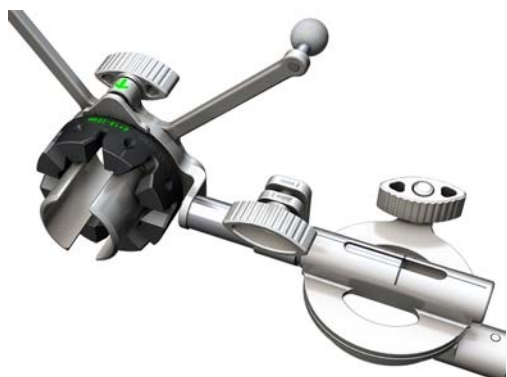

PASO 8

- Seleccione el conjunto de discos que contiene el diámetro requerido.
- Coloque el disco interno en la unidad de referencia **VarioGuide**.
- Haga coincidir el diámetro requerido del disco interno con la flecha de la estrella.
- Presione el disco interno hasta que encaje.




PASO 9

- Fije el anillo de cierre ① al disco externo ②.
- Haga coincidir la línea del anillo de cierre con la línea del disco interno.



PASO 10

- Enrosque el anillo de cierre en su sitio.

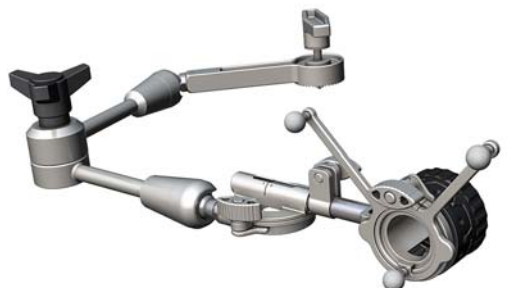

PASO 11

- El sistema **VarioGuide** está ahora montado en la posición inicial.

VarioGuide ahora se puede fijar al cabezal o al adaptador en V (en la posición del brazo izquierdo o del brazo derecho).



Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemania

Europa, África, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
EE.UU. y Canadá: +1 800 597 5911
Japón: +81 3 3769 6900
América Latina: +55 11 33 55 33 70
Francia: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Este manual contiene información protegida mediante copyright. Ninguna de sus partes puede ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Edición: 1.1

Nº de artículo: 60903-42ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso y no implica la aceptación de ningún tipo de responsabilidad por parte de Brainlab.

Más información en las "Limitaciones de responsabilidad" de las Condiciones de Venta de Brainlab.

